

REVYLINE



RL 030

SONIC ELECTRIC TOOTHBRUSH


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗВУКОВАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед первым применением электрической щетки RL 030 внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Технические характеристики	4
Комплектация	4
Меры предосторожности	5
Установка и замена батареек	6
Насадки в комплекте	6
Вкл/выкл прибора	6
Процесс чистки	7
Уход за зубной щеткой	7
Предупреждения медицинского характера	8
Транспортировка, хранение и утилизация прибора	8
Гарантия	9

Если у вас остались вопросы,
обратитесь в сервисный центр:

 **8 (800) 775-38-49**

 **www.revyline.ru**



Сменная насадка
с вентиляцией

Кнопка вкл/выкл

Корпус прибора

Съемная часть

Батарейка AAA

Электрическая звуковая зубная щетка

Предназначена для эффективной чистки зубов.

- 1 режим работы
- Частота колебаний щетинок – 20 000 в мин.
- Материал корпуса – ABS-пластик
- Влагозащита – IPX4
- Работает от одной батарейки AAA
- Потребляемая мощность – 0,3 Вт
- Номинальное напряжение – 1,5 В
- Размер головки (чистящей поверхности) – 21x9x11 мм
- Габариты – 120x16 мм
- Гарантия – 2 года
- Средний срок службы – 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок щетки
- Насадки с мягкой щетиной – 2 шт.
- Батарейка AAA
- Дорожный футляр
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров, нанесения вреда себе и окружающим:

- Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Не используйте щетку во время принятия душа.
- Не вставляйте батарейку в прибор влажными руками.
- Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
- Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
- Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
- Используйте прибор вдали от горячих поверхностей.
- Не включайте щетку в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
- Перед использованием щетки удалите из полости рта все съемные конструкции.
- Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
- Электрическую зубную щетку Revyline RL 030 не рекомендуется использовать лицами (в т.ч. детьми) с ограниченными физическими возможностями, психическими нарушениями и отсутствием опыта использования подобного прибора.
- Детям до 10 лет следует использовать устройство под присмотром взрослого.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ




В комплектации щетки RL 030 – 1 батарейка AAA.



Чтобы установить или заменить батарейку, поворотным движением против часовой стрелки отсоедините от корпуса щетки нижнюю часть блока, вставьте батарейку и поворотным движением по часовой стрелке присоедините нижнюю часть блока к корпусу щетки.

НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ


В базовой комплектации зубной щетки RL 030 2 сменные насадки с мягкой щетиной.

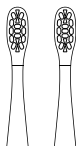

Внимание! Согласно правилам личной гигиены, совместное использование одной насадки различными пользователями недопустимо.

Установка и замена насадки

Снимите защитный колпачок и установите насадку, надев ее на металлический стержень таким образом, чтобы рабочая поверхность насадки совпадала с лицевой стороной корпуса щетки.

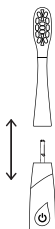


Стоматологи рекомендуют менять насадку каждые 3 месяца для сохранения высокой эффективности гигиены полости рта.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА



Включение и выключение щетки осуществляется нажатием кнопки вкл/выкл.


ПРОЦЕСС ЧИСТКИ

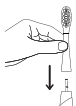


Наденьте насадку на посадочное место. Оставьте небольшой зазор между насадкой и корпусом для возможности осуществления вибрации.



Прежде чем вы приступите к чистке зубов, намочите чистящую головку щетки и нанесенную на нее зубную пасту. Так паста будет лучше пениться, обеспечивая эффективное удаление зубного налета.

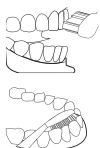

Поднесите насадку щетки к поверхности зубов, расположив параллельно линии десен. Включите щетку. Производите чистку мягко. Не надавливайте слишком сильно, чтобы не травмировать эмаль и десну.

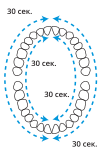

Перемещайте чистящую головку медленно, совершая возвратно-вращательные движения. Для обеспечения равномерного очищения разделите полость рта на четыре равных условных зоны и очищайте их поочередно в течение двух минут.

После завершения чистки тщательно прополощите полость рта чистой водой.

УХОД ЗА ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ

- Регулярно очищайте зубную щетку RL 030.
- Промойте чистящую головку, чтобы удалить остатки пасты после чистки, и дайте ей высохнуть на воздухе.
- Не трите щетину, чтобы не деформировать ее.
- Ополосните рукоятку, чтобы удалить загрязнения после чистки, и высушите мягкой тканью.
- Не погружайте зубную щетку в воду.
- Не чистите зубную щетку агрессивным моющим средством и при температуре воды выше +40 °C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

Небольшая кровоточивость и дискомфорт десен в начале использования данного устройства являются нормой.

Если кровотечение и дискомфорт сохраняются более одной недели, следует обратиться к стоматологу.

Если в последние 2 месяца вы перенесли операцию в ротовой полости, установили имплантаты или протезы, то перед началом использования данного устройства следует проконсультироваться с врачом.

Если у вас установлен кардиостимулятор или другие подобные имплантированные устройства, перед использованием прибора обратитесь к своему врачу.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги.

Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0 °С до +20 °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на прибор – 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

- На расходные материалы и комплектующие.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению, неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям, модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом), нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания.
- На товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками.
- На неисправности, которые вызваны независимыми от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

REVYLINE

главный секрет вашей улыбки