

# REVYLINЕ SPA DENT 01 Инструкция по применению

Улучшает гигиену полости рта, освежает дыхание и предотвращает развитие кариеса.

## Комплектующие

- 1 распределитель
- 5 насадок
- 1 рукоятка
- 1 шланг из полихлорвинила медицинского назначения
- 1 стойка с настенным креплением
- соединитель для крана стандартный
- 1 шестигранный ключ стандартный

Соединители для шланга нестандартных размеров приобретаются отдельно. Чтобы закрепить стойку на стене, отрежьте шаблон по пунктирной линии, приложите его к стене и по разметке просверлите два отверстия.

## Внимание!

1. Не используйте ирригатор для промывания глаз, ушей и носа.
2. Использование ирригатора детьми осуществляется только под контролем родителей.
3. Используйте воду комфортной для вас температуры.
4. Используйте комфортный для вас напор воды.


## Сборка и установка



1 Снимите со смесителя аэратор и установите распределитель на наружную резьбу крана



2 Вставьте шланг в соединитель, обозначенный голубым цветом. Удерживайте соединитель при извлечении шланга

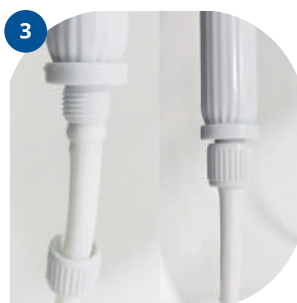

3 Присоедините оставшийся конец полихлорвинилового шланга к рукоятке с насадкой



4 Включите распределитель и откройте кран. Вода будет подаваться в насадку




5 После завершения ирригации выключите распределитель. Вода будет снова поступать из крана



6 Наклейте двухсторонний скотч на заднюю часть стойки ирригатора и закрепите ирригатор на стене



7 Сборка завершена

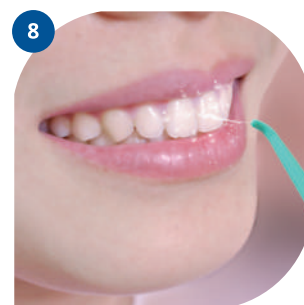

8 Прибор готов к использованию

## Применение

1. Перед применением ирригатора установите комфортную для вас температуру воды. Ирригатор не требует подключения к сети, тихо работает, прост и безопасен в использовании.
2. Во время ирригации направляйте насадку вдоль линии десны и в межзубные промежутки. После окончания процедуры отключите воду и извлеките насадку из полости рта.
3. Используйте ирригатор после каждого приема пищи и перед сном. Он освежает дыхание, оздоравливает десны и улучшает гигиену полости рта.

## Гарантийный талон

Гарантия 1 год.

Название организации .....

Дата продажи .....

Место для печати

Горячая линия: 8 (800) 700-53-60; [www.revyline.ru](http://www.revyline.ru)



Произведено по заказу ИП Обушников М. А., г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 13, к. 1. Изготовлено: KEEN – WITTED INDUSTRIAL CO., LTD. 4F., NO.85, Sec.6, Jhongsiao E. Rd., Nangang District, Taipei City, Taiwan.