



# REVYLINЕ

## RL 900

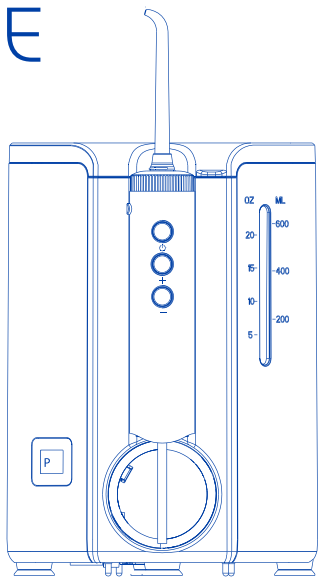

Ирригатор  
для полости  
рта

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

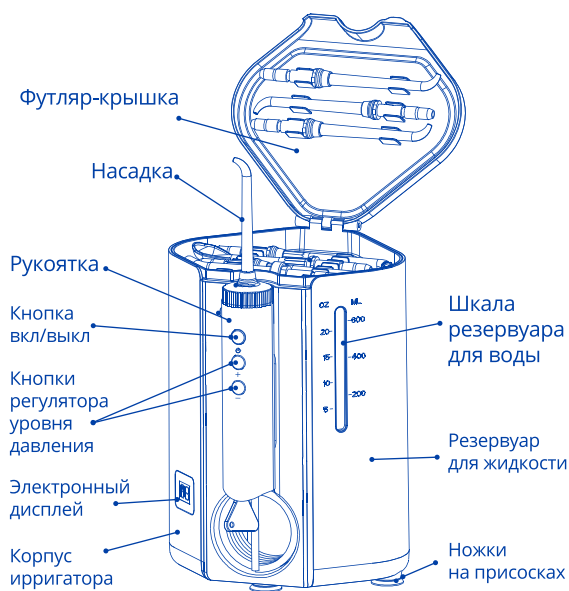

Поздравляем!

Уважаемый клиент, Вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит Вашим зубам и деснам быть красивыми и здоровыми. Испытайте новый уровень чистоты уже после первого применения.

**Важно!** Перед использованием ирригатора Revyline RL 900 внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте правила безопасности. Это поможет вам максимально эффективно и комфортно использовать прибор.

#### Меры предосторожности



1. Не берите штепсельную вилку влажными руками.
2. Не допускайте контакта корпуса прибора с водой или другими жидкостями.
3. Не используйте ирригатор во время принятия душа.
4. Если прибор упал в воду, не дотрагивайтесь до него и немедленно выдерните вилку из розетки.
5. Если прибор находился в условиях отрицательной температуры, перед эксплуатацией необходимо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 12 часов.
6. Перед каждым использованием прибора всегда проверяйте целостность кабеля питания.
7. Подключайте прибор только к электрической розетке, рассчитанной на соответствующую нагрузку.
8. Не направляйте поток воды под язык, в уши, нос или другие чувствительные участки. Прибор генерирует Мощную пульсирующую водную, которая может нарушить целостность Кожных покровов и слизистых оболочек.
9. Используйте прибор в соответствии с инструкцией по применению и/или рекомендациями стоматолога.
10. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
11. Не вставляйте инородные предметы в разъемы и отверстия на корпусе прибора.
12. Не добавляйте в воду для ирригатора гранулированные вещества, например, соль. Они забивают насос и рукоятку ирригатора.
13. Не заливайте в резервуар ополаскивателя, содержащие йод, масло, отбеливающие ингредиенты, а также ополаскиватели, допускающие выпадение естественного осадка и ополаскиватели которые не полностью растворяются в воде. Они снижают эффективность и срок службы прибора.
14. Используйте для ирригации воду или раствор, рекомендованный стоматологом.
15. Не используйте прибор при наличии открытых ран в полости рта или на языке.
16. Если Вы находитесь в группе риска по состоянию здоровья и принимаете антибиотики перед проведением стоматологического лечения, перед применением ирригатора проконсультируйтесь со стоматологом.
17. Не снимайте резиновый кончик с прозрачной насадки для очистки пародонтальных карманов. Если он потерялся, замените насадку на новую.
18. Не разрешайте детям играть с прибором.
19. Использование ирригатора детьми возможно с 6 лет только под присмотром взрослых.

#### Эксплуатация устройства

1. Вставьте вилку шнура питания в исправно работающую розетку.
2. Снимите футляр-крышку, извлеките из корпуса резервуар, наполните его теплой очищенной водой. Установите резервуар внутрь корпуса прибора.
3. Установите насадку в разъем, расположенный на верхней части рукоятки, и вставьте её до щелчка. Для удаления насадки удерживайте нажатой кнопку блокировки и извлеките насадку из корпуса прибора.  
**Внимание!** Не нажимайте кнопку извлечения насадки во время работы устройства.
4. Для включения прибора нажмите кнопку включения/выключения питания, расположенную на рукоятке. Для выбора мощности напора водной струи используйте кнопки (+/-) регулирующие давление, которые расположены на рукоятке устройства ниже кнопки включения питания. Наклонитесь к раковине, введите насадку ирригатора в полость рта и расположите её кончик напротив зуба. Во время ирригации продвигайте насадку вдоль линии десны, последовательно очищая каждый зуб.
5. После завершения использования прибора переведите регулятор давления жидкости на минимальный уровень, а затем нажмите кнопку включения/выключения питания.

#### Режим ирригации

Расположите насадку в полости рта таким образом, чтобы поток струи был направлен под углом 45° к поверхности зуба. Чтобы вода не разбрызгивалась, неплотно сомкните губы. Во время ирригации вода естественным образом должна вытекать из полости рта в раковину. Для лучшего результата вначале очистите боковые зубы (моляры), а затем передние. Продвигайте кончик насадки вдоль линии десны, задерживая его между зубами. Продолжайте процедуру до тех пор, пока не очистите зубы изнутри и снаружи, а также все межзубные промежутки.

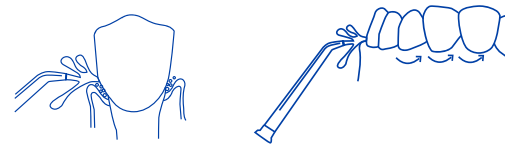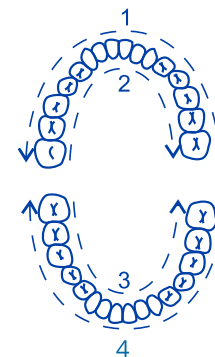

#### Выбор режима уровня давления

Уровень давления ирригационного потока устанавливается при помощи кнопок, расположенных на рукоятке. Конструкция прибора позволяет выбрать один из десяти режимов интенсивности. Выбранный режим давления отображается на электронном дисплее.

**Внимание!** В начале применения прибора рекомендуется использовать минимальный уровень давления. Это поможет адаптироваться к ирригационной чистке и избежать риска появления воспаления и кровоточивости десен.

#### После завершения ирригации

Выключите ирригатор. Извлеките вилку шнура питания из розетки. Ирригатор не предназначен для хранения в нем воды. После использования оставшуюся жидкость необходимо слить.

#### Использование ополаскивателей для полости рта и других растворов

Для лучшего эффекта рекомендуется использовать ополаскиватели и специализированные бальзамы Revyline. Расчет дозировки производителе согласно инструкции используемого средства. После каждого использования растворов необходимо промыть ирригатор.

**Внимание!** В некоторых антисептических растворах могут содержаться нерастворимые частицы, которые при контакте с системой ирригатора могут повлиять на его работоспособность и уменьшить срок службы. После каждого использования специального раствора для ирригатора тщательно промойте систему. Наполните резервуар достаточным количеством воды, направьте насадку по направлению к раковине и включите устройство. Прогоните через систему ирригатора всю воду в резервуаре. При этом вымываются остатки растворов из ирригатора, предохраняя систему от засорения.

#### Очистка и уход

Перед очисткой ирригатора отсоедините блок питания от электрической розетки. При необходимости используйте для очистки мягкую ткань и мягкое неабразивное моющее средство. Не погружайте насадки в кипящую воду. Для их очистки используйте спирт. При регулярном использовании жесткой воды на деталях прибора могут образовываться известковые отложения. Для их ликвидации используйте специальное чистящее средство Revyline, согласно инструкции по его применению. Производитель рекомендует проводить чистку ирригатора от одного до трех раз в три месяца в зависимости от жесткости воды.

#### Гарантия

Гарантия на прибор - 2 года. Техническое обслуживание ирригатора осуществляется в сервисном центре в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее сервис устройства производится за счет покупателя.

#### Гарантия не распространяется:

На расходные материалы и комплектующие;  
На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению; неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям; модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом);  
На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания;  
На товары, эксплуатировавшиеся с неустранимыми недостатками;  
На неисправности, которые вызваны независимыми от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей;  
На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

#### Распространенные проблемы и их решение

##### Не извлекается насадка.

**Решение:** Для извлечения насадки необходимо повернуть поворотное кольцо против часовой стрелки, которое поднимется вверх. После этого насадку можно свободно извлечь из рукоятки.

#### Сложности выбора уровня напора струи.

**Решение:** После включения прибора выберите с помощью кнопок регулятора давления необходимый уровень мощности струи, который подбирается индивидуально. Для повышения эффективности ирригации используйте напор воды, не причиняющий вам дискомфорта.

#### Кровоточивость во время ирригации.

**Решение:** Кровоточивость является характерным симптомом воспаления десен. Прежде всего необходимо уменьшить уровень давления струи. Ирригатор удаляет зубной налет и бактерии из десен. При дальнейшем использовании кровоточивость прекратится. При воспаленных и слабых деснах используйте пародонтальную насадку.

#### Максимальный напор воды доставляет дискомфорт.

**Решение:** Большинству людей подходит средний уровень давления жидкости. Комфортный напор жидкости можно подобрать регулятором уровня давления жидкости.

#### Как предотвратить разбрызгивание воды?

**Решение:** Во время ирригации не стойте вертикально прямо с широко открытым ртом. Наклонитесь по направлению к раковине, приоткройте рот. Вода будет естественным образом выливаться из полости рта.

#### Мотор работает, но вода не подается.


**Возможные решения:**

1. Извлеките резервуар для воды, а затем повторно закрепите его в корпусе;
2. Повысьте уровень давления регулятором давления жидкости;

#### Протечка между насадкой и корпусом.

**Решение:** Проверить, вставлена ли насадка полностью. При необходимости извлечь насадку, а затем вставить вновь.

#### Насадки в комплекте

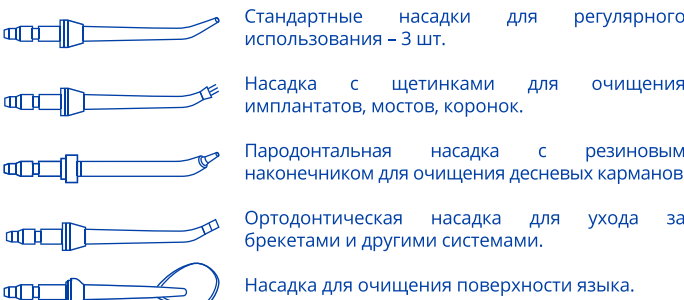

**Внимание!** Насадка должна быть строго индивидуальной. Совместное использование одной насадки различными пользователями запрещено.

### ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА REVYLINЕ

Модель: RL 900

Предназначен для профилактики болезней зубов и десен

Модель: RL 900

Уровень давления жидкости: 140 - 860 кПа

Объем резервуара: 600 мл

Режимы давления струи: 10

Частота пульсации: до 1 500 в минуту

Питание: от сети переменного тока 100 - 240V, 50/60 Hz

Вес: 870 г.

Гарантия: 2 года

Средний срок службы: 5 лет

Товар не имеет срока годности

Хранить при комнатной температуре

Страна производителя - Китай

Произведено по заказу ИП Обушенков М.А.,

г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 13, корп. 1.

Изготовлено: Fly Cat Electrical Co., Ltd. No.4 Bldg, Xianyuxing industrial park, Gonghe community, Shajin Bao' an Shenzhen, China.

Если у вас остались вопросы, обратитесь в сервисный центр.

8 (800) 775-38-49

www.revyline.ru

## Гарантийный талон

Название организации .....

Дата продажи.....

Место для печати